CRIAR CONTA NO EYERCLOUD - RETINÓGRAFO EYER

1. O QUE É O EYERCLOUD?


O EyerCloud é uma plataforma online de armazenamento e gestão de exames oftalmológicos desenvolvida pela PHELCOM Technologies.
A criação da conta nesta plataforma é requisito **indispensável** para a utilização do retinógrafo.

2. COMO CRIAR A CONTA?


No equipamento, pressione e segure o botão lateral por alguns segundos até aparecer a logo de inicialização da Samsung:




Após ligar, conecte o equipamento à rede Wi-Fi. (Arraste a tela de cima para baixo. Clique no ícone de Wi-Fi e conecte-se à rede local)
Obs.: Este procedimento é realizado de modo semelhante ao que realizamos no nosso celular particular.

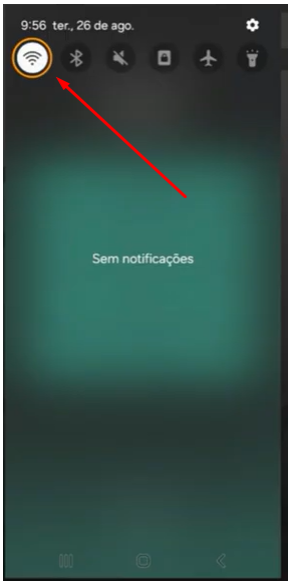

Clique em acessar o Eyer:

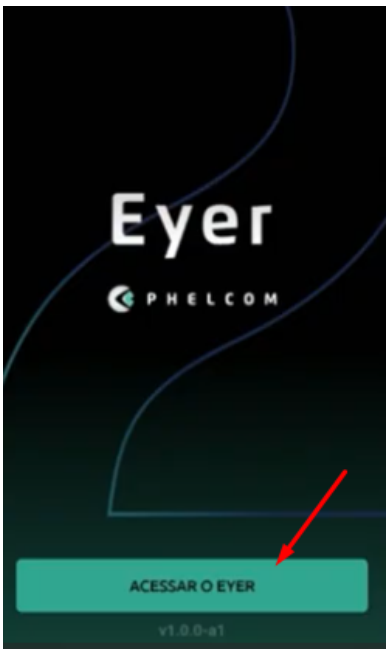

Selecione o idioma, aceite os termos de uso e selecione a opção “**Primeiro que compro**”, para criar o perfil do usuário que será utilizado no município/unidade de saúde.

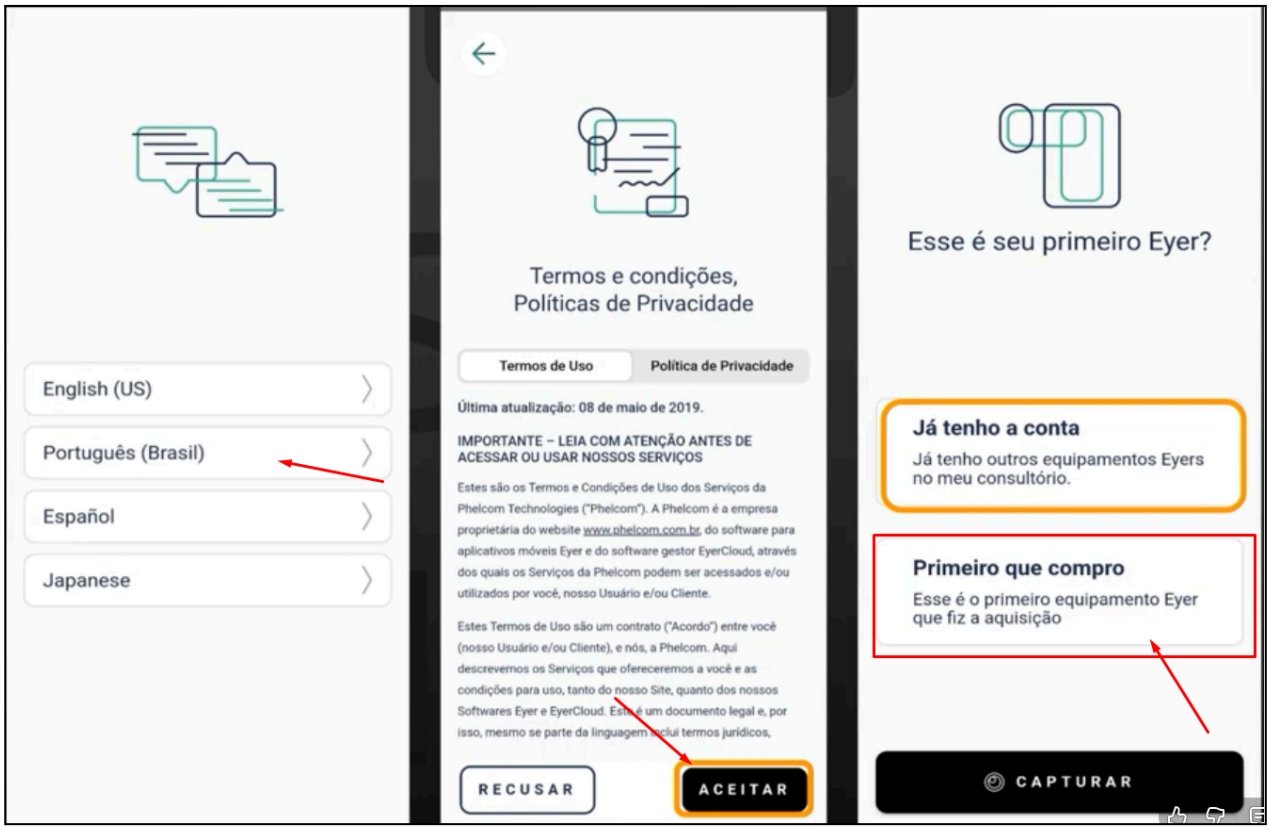

Os próximos passos serão a **criação de um usuário, senha e PIN.**

DICA: O município pode criar um e-mail de uso exclusivo para o retinógrafo (exemplo: retino.municípiox@municipio.pr.gov.br) ou ainda utilizar um e-mail da secretaria de saúde ou unidade de saúde em que o equipamento ficará.

Não utilizar e-mail particular.
Utilizar e-mail da UBS, e-mail exclusivo do retinógrafo ou e-mail da SMS.

O nome, sobrenome do usuário e razão social podem ser o nome do município (caso o equipamento venha a ser itinerante e atenda mais de uma UBS) ou nome da UBS, caso o equipamento fique de uso exclusivo para este local.

Exemplo:

- Nome: MUNICÍPIO DE XXXXXX
- Sobrenome: SMS DE XXXXXXX OU UNIDADE DE SAÚDE XXXXXX
- Razão social: UNIDADE DE SAÚDE XXXXXXX OU SMS DE XXXXXXXX

A senha deve ser uma senha forte com letras e números. E o PIN deve ser criado com quatro a seis dígitos.

IMPORTANTE
Anote o e-mail, a senha e o PIN criados e leve no dia da capacitação presencial.
Esses dados serão imprescindíveis para a finalizarmos a configuração do equipamento.

Um código de seis dígitos será enviado ao e-mail informado. Insira-o no campo de confirmação para validar o cadastro.

Agora, na tela de login, repetir o e-mail, repetir a senha, selecionar o usuário e colocar o PIN.

No primeiro acesso, irá aparecer uma tela de downloads. Selecionar a opção “todos” para forçar a sincronização e o aparelho está pronto para ser utilizado.

Mais informações:
https://www.youtube.com/watch?v=s79h0LXc9wc

3. AINDA TEM DÚVIDAS?

Entre em contato com nossos canais de comunicação:

E-mail: telessaude.pr@sesa.pr.gov.br

WhatsApp: (41) 98781-9788 (Apenas mensagens - atendimento de segunda a sexta-feira das 07h30 às 18h00)